

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Maak kennis met uw Skinera Microdermabrasie | 59 |
| Contra-indicaties en waarschuwingen..... | 61 |
| Gebruik Skinera Microdermabrasie niet als: | 63 |
| Wat mag u van de Skinera Microdermabrasie verwachten? | 64 |
| Mogelijke bijwerkingen | 64 |
| Voorafgaand aan de eerste behandeling..... | 65 |
| Aan de slag! | 67 |
| Onderhoud en opslag..... | 68 |
| Reserveonderdelen en verbruiksartikelen..... | 70 |
| Problemen oplossen | 70 |
| Klantenservice..... | 71 |
| Garantie..... | 71 |
| Verwijdering..... | 75 |
| Specificaties..... | 75 |
| Tekens en symbolen | 76 |

Maak kennis met uw Skinera Microdermabrasie

Skinera Microdermabrasie is een elektrisch apparaat. Bij het gebruik van het apparaat moet dan ook speciale aandacht worden besteed aan de veiligheid. Lees alle waarschuwingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Het is belangrijk dat u de instructies over het gebruik van het apparaat, inclusief procedures voor na het gebruik, leest, begrijpt en strikt opvolgt. We raden u aan om te zorgen dat u de instructies weer kent voordat u een behandeling uitvoert.

NL

Inhoud van de verpakking

Uw Skinera Microdermabrasie verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1x Skinera Microdermabrasie-apparaat
- 1x Set filters
- 2x behandel tips (fijn en grof)
- Rubberen dopjes (reserve)
- AC/DC-adapter met kabel
- Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving

Skinera Microdermabrasie is een behandelapparaat met een dubbele werking, bedoeld voor gebruik in huis. Het apparaat combineert microdermabrasie exfoliatie en vacuümstimulatie van de huid.

Microdermabrasie exfoliatie

- Voorzichtige exfoliatie zonder schurende werking voor een soepelere en frissere huid.
- Helpt de kleur, textuur en elasticiteit van de huid te verbeteren.

- Helpt ouderdomsvlekken te verminderen.
- Helpt fijne lijntjes rondom de ogen te verminderen.

Vacuümstimulatie

- Stimuleert de huid, zodat deze er jeugdiger uitziet.
- Brengt bepaalde onzuiverheden naar het oppervlak.
- Verzamelt de dode huidcellen, zodat deze kunnen worden verwijderd.

Dit apparaat heeft een behandel-tip (1), rubberen dop (2), filter (3), bedieningsknop (4), aansluiting (5) en adapter met kabel (6). Raadpleeg het schema voor in deze gebruiksaanwijzing voor de locatie van de verschillende functies op het apparaat.

Beoogd gebruik

Skinera Microdermabrasie is een apparaat dat in de winkel verkrijgbaar is, bedoeld voor het exfoliëren van de bovenste huidlaag, zodat de huid er frisser uitziet. Het apparaat is bedoeld voor de behandeling van:

- verouderende huid van het gezicht, de nek en handen.
- fijne lijntjes in het gezicht.
- verkleuring van de huid.
- donkere plekken en oppervlakkige littekens.
- doffe en door de zon beschadigde huid.

Het apparaat is bedoeld om zelf uw huid thuis te behandelen. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

Contra-indicaties en waarschuwingen

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en let goed op de waarschuwingen en contra-indicaties.



Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, personen jonger dan 16 jaar, personen met fysieke, sensomotorische of psychologische beperkingen of personen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met het apparaat gaan spelen.

NL

Gebruik Skinera Microdermabrasie niet wanneer u last hebt van:



- Rosacea.
- Endocriene stoornissen die niet onder controle zijn, zoals diabetes en schildklierziekten.
- Ongewone huidandoeningen als gevolg van diabetes, systemische ziekten of andere metaboli-sche ziekten.
- Mogelijke kwaadaardige huidandoeningen of wanneer u in de afgelopen 3 maanden be-stralingen of chemotherapie hebt ondergaan.
- In de afgelopen zes maanden medicatie op uw huid heeft gebruikt op voorschrift van uw huisarts.
- Elke andere situatie waardoor het volgens uw arts of dermatoloog onveilig is om uzelf te behandelen.

Behandel geen oppervlakken waarop sprake is van:



- Actief eczeem, psoriasis, beschadigingen, open wonden of infecties (herpes), moedervlekken of wratten, ongewone huidaandoeningen door systemische en metabole ziekten (zoals diabetes).
- Eerdere uitbraken van herpes.
- Getraumatiseerde of beschadigde huid.
- Recente blootstelling aan de zon zonder bescherming wacht 1 dag. Bij gebruide of zonverbrande huid dient u 3 dagen te wachten.

Aanvullende waarschuwingen



- Gebruik dit product niet op uw tepels of geslachtsdelen.
- Het aanbevolen gebruik is maximaal twee keer per week.
- Gebruik de lage stand wanneer u ongemakken ervaart.
- Stop direct met het gebruik wanneer uw huid erg rood is.
- Verwijder alle sieraden voordat u de huid behandelt.
- Bescherm uw huid minimaal met factor 30 wanneer u de huid na een behandeling blootstelt aan de zon.
- Zorg altijd dat uw huid en handen droog zijn voordat u het apparaat gebruikt of de stekker aanraakt.
- Houd het apparaat uit de buurt van water of vloeistoffen! Gebruik het niet in de buurt van badkuipen, douchecabines, wasbakken

of andere reservoirs die gevuld zijn met water. Plaats het apparaat niet op een locatie waar het kan vallen, waar er tegen kan worden gedrukt of waar water of andere vloeistoffen aanwezig zijn. Zo ontstaat elektrocutiegevaar. Trek de stekker direct uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet opnieuw.

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat u altijd bij de AC/DC-adapter kunt, zodat hij in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact kan worden verwijderd. Trek de stekker direct uit het stopcontact wanneer u klaar bent.
- Houd het apparaat niet vast aan de kabel van de AC/DC-adapter.
- Verwijder de stekker direct uit het stopcontact wanneer er sprake is van storingen.
- Probeer uw Skinera Microdermabrasie-apparaat niet zelf aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel.

Gebruik Skinera Microdermabrasie niet als:

- De adapter of accessoires niet zijn aanbevolen door Invention Works B.V.
- De kabel of stekker van het apparaat beschadigd is. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- U rook ziet of ruikt tijdens het gebruik.
- Het apparaat niet goed werkt of beschadigd lijkt.

- De behuizing van het apparaat gebarsten is of uit elkaar valt.
- Het apparaat in het water is gevallen.

Neem in die gevallen contact op met de klantenservice.

Wat mag u van de Skinera Microdermabrasie verwachten?

Het is normaal dat u tijdens een behandelsessie het volgende ervaart of voelt:

- **Een zoemend geluid uit het apparaat:** dit is de aanzuigpomp.
- **Een lichtrode huid:** deze kleur moet binnen een paar uur en uiterlijk na een dag wegtrekken.



- Stop direct met het gebruik wanneer uw huid erg rood is.
- Neem contact op met uw arts wanneer u complicaties ervaart.

Mogelijke bijwerkingen

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en alle waarschuwingen en contra-indicaties in acht neemt, zult u niet snel last krijgen van complicaties en bijwerkingen. Alle cosmetische behandelingen, inclusief behandelingen die zijn ontwikkeld voor thuisgebruik, brengen een zekere mate van risico's met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u de risico's en complicaties die zich kunnen voordoen begrijpt en aanvaardt.

| Bijwerking | Risico |
|---|--------|
| <p>Roodheid van de huid Het kan voorkomen dat oppervlakkige bloedhaervaten dilateren. Hierdoor kan uw huid een paar dagen rood zijn. Daarnaast kunnen sommige haervaten rode plekken vertonen die na verloop van tijd weer wegtrekken. Spoel de huid in dat geval direct met water.</p> | Laag |
| <p>Blauwe plekken U kunt lichte blauwe plekken krijgen. Deze moeten na 2 tot 3 dagen weer wegtrekken.</p> | Laag |

Neem contact op met uw arts wanneer u aanhoudende symptomen ervaart.

Voorafgaand aan de eerste behandeling

Om uw Skinera Microdermabrasie te gebruiken, doorloopt u de volgende stappen:

1. Haal het apparaat en de overige onderdelen uit de doos.
2. Steek de adapterkabel in de aansluiting op het apparaat en steek de adapter in een stopcontact.
3. Bekijk de aanbevelingen voor het gebruik van Skinera Microdermabrasie op verschillende behandeloppervlakken.

Behandeloppervlakken

We raden u aan om te beginnen met de lichte zuigkrachtmodus en over te stappen op de sterke zuigkrachtmodus nadat u het apparaat een paar keer hebt gebruikt. Behandel bepaalde oppervlakken in de lichte modus wanneer u ongemakken ervaart.

| Behandeloppervlak | Aanbevelingen |
|--------------------------|--|
| Voorhoofd, wangen en kin | Beweeg het apparaat vanuit het midden van uw huid naar buiten, richting de haargrens. |
| Ogen en neus | Gebruik in het gebied rondom uw wenkbrauwen korte bewegingen naar boven. Vermijd de oogleden. Gebruik rechte bewegingen omlaag in het gebied rondom uw neus. Volg daarbij de kromming van de neus en het contour van de jukbeenderen. |
| Nek | Gebruik soepele bewegingen omlaag en behandel het hele nekoppervlak. |



Behandel elk oppervlak in eerste instantie 2 tot 4 keer. U kunt dit aantal verhogen naar 4 tot 6 keer wanneer uw huid aan de behandeling is gewend.


Fijne en grove tips voor Skinera Microdermabrasie

Het apparaat heeft twee behandel tips. We raden u aan om met de fijne tip te beginnen.

- Gebruik de fijne tip voor algemene behandelingen en een nauwkeurig eindresultaat.
- Gebruik de grove tip voor zware exfoliatie.

Ga als volgt te werk om de tips te wisselen:

1. Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op een stopcontact
2. Verwijder de huidige tip (1) van het apparaat en vervang het door de andere tip. Zorg dat de tip stevig is bevestigd voordat u hem gebruikt.

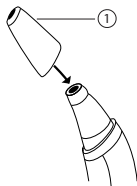

NL

Aan de slag!

U staat op het punt om uw huid frisser en gladder te maken! Een behandeling met Skinera Microdermabrasie is heel eenvoudig. Volg gewoon de onderstaande stappen voor elk oppervlak dat u wilt behandelen. De totale behandelduur is ongeveer 5 minuten.

Aanbevolen voorzorgsmaatregelen

- Voer een lokale test uit op een klein deel van de huid voordat u een oppervlak voor het eerst behandelt. Ga door met de behandeling wanneer u geen bijwerkingen ervaart.
- Gebruik tijdens de eerste 2 of 3 behandelingen de lichte zuigkrachtmodus.
- We raden u aan om het apparaat niet vaker dan twee keer per week te gebruiken.



- Stop direct wanneer u ongemakken ervaart.

Behandelstappen

1. Zorg dat uw huid schoon en droog is en dat er geen poeder, crème of gel aanwezig is.
2. Controleer of het rubberen dopje (2), het filter (3) en de tip (1) stevig zijn bevestigd. Gebruik tijdens de eerste behandelingen de fijne tip.
3. Druk op de bedieningsknop (4) om het apparaat in te schakelen.

Uw Skinera Microdermabrasie is nu klaar voor gebruik in de lichte zuigkrachtmodus.

4. Plaats de tip stevig op uw huid, zodat u de zuigkracht voelt.
5. Behandel elk oppervlak overeenkomstig de aanbevelingen in hoofdstuk “Behandeloppervlakken”.
6. Druk opnieuw op de bedieningsknop om te schakelen tussen de lichte en sterke zuigkracht modus.
7. Druk de bedieningsknop, afhankelijk van de actieve modus, een of twee keer kort in om het apparaat uit te schakelen wanneer u klaar bent met de behandeling.
8. Verwijder de stekker uit het stopcontact en berg de Skinera Microdermabrasie op in de originele verpakking. Raadpleeg hoofdstuk “Onderhoud en opslag”.

Nazorg na de behandeling

- Vermijd direct zonlicht wanneer u uw huid net hebt behandeld en breng minimaal factor 30 aan.
- U kunt eventueel een gezichtsmasker of een dag- of nachtcrème aanbrengen.


Onderhoud en opslag

Het is belangrijk om uw Skinera Microdermabrasie na elke behandeling schoon te maken en goed op te ruimen.

- Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact.
- Maak het apparaat schoon met een schone en droge doek. Gebruik een schoonmaakvloeistof met maximaal 70% alcohol of een andere vloeistof zonder schuurmiddelen. Gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen: hierdoor wordt uw apparaat beschadigd.
- Maak de tip schoon door hem van het apparaat te halen,

met zeep en water te wassen en daarna grondig af te drogen.

- Maak het filter schoon door het van het apparaat te halen, vuil te het apparaat te plaatsen.
- Wij raden u aan het apparaat na het reinigen in de originele doos op te bergen.
- Behalve de tips dient u uw Skinera Microdermabrasie nooit in water onder te dompelen.

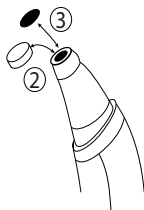

NL

Het filter vervangen

Het filter moet schoongemaakt of vervangen worden omdat het verwijderde huid aantrekt. We raden u aan om deze procedure om de paar behandelingen uit te voeren.

Ga als volgt te werk om het filter te vervangen:

1. Verwijder de tip van het apparaat . U ziet vervolgens een rubber dopje en het kleine zwarte filter.
2. Verwijder het rubberen dopje (2) en verwijder daarna het filter (3).
3. Maak het filter schoon door vuil met een borsteltje te verwijderen. Plaats het filter daarna terug op het apparaat. Vervang een filter door het huidige filter te verwijderen en een nieuw filter te plaatsen.
4. Plaats het rubberen dopje terug en plaats daarna de tip weer op het apparaat. Zorg dat alles goed is aangesloten.

De tip vervangen

We raden u aan om de tip eens per zes maanden te vervangen. Eerder vervangen is nodig wanneer het ruwe uiteinde van de tip beschadigd is.

Reserveonderdelen en verbruiksartikelen

U kunt meer filters en tips bestellen via onze website www.inno-webshop.com. Neem contact op met de klantenservice voor vervangende rubberen dopjes of AC/DC-adapters.

NL Problemen oplossen

Probeer uw Skinera Microdermabrasie apparaat niet te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

| Probleem | Controle |
|---|---|
| Mijn Skinera Microdermabrasie start niet. | Controleer of de adapter goed op het apparaat en op een stopcontact is aangesloten en of u op de bedieningsknop hebt gedrukt. |
| Ik voel geen zuigkracht wanneer het apparaat contact maakt met mijn huid. | Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of het filter, het rubberen dopje en de tip goed zijn geplaatst. |

Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice.



- Verwijder de stekker direct uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed werkt.

Klantenservice

Ga voor meer informatie naar onze website www.skinera.eu. Deze handleiding is ook beschikbaar als PDF-download op www.skinera.eu.

Neem contact op met de Klantenservice om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen of andere problemen met uw apparaat te melden. Hieronder vindt u onze contactgegevens:

NL

| Land | Servicenummer | Email |
|-----------------|---------------|--|
| Groot-Brittanië | 0800-3586048 | info@skinera.eu |
| Duitsland | 04473-3270450 | info@skinera.eu |
| Frankrijk | 0800-941298 | info@skinera.eu |
| Nederland | 0900-0400492 | info@skinera.eu |
| Spanje | 807001725 | info@skinera.eu |
| Italië | | info@skinera.eu |

Garantie

Wat valt er onder deze garantie? Invention Works B.V., zijn eventuele dochterondernemingen (hierna: Invention Works B.V.) of de erkende dealer bij wie u uw Skinera™ product heeft aangeschaft (hierna: het apparaat) zal het apparaat repareren of vervangen indien er tijdens de garantieperiode enige materiële gebreken worden ontdekt die veroorzaakt zijn door Invention Works B.V., hetzij in het apparaat zelf, hetzij in de werking ervan.

Wie kan op grond van dit garantiebewijs aanspraak maken op de garantie? Alleen u, de oorspronkelijke koper van het apparaat die het apparaat heeft aangeschaft bij Invention Works B.V. of zijn erkende dealers, kan aanspraak maken op de garantie die omschreven is in dit garantiebewijs. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie-service, dient u te bewijzen dat u de oorspronkelijke koper van het apparaat bent door een originele bon van aankoop van het apparaat te tonen. Deze garantie is geen internationale garantie. De garantie wordt u uitsluitend toegekend in het land waar de erkende dealer of het Invention Works B.V. filiaal waarbij u het apparaat heeft aangeschaft, gevestigd is.

Hoe lang is dit garantiebewijs geldig? De garantie dekt reparatie-aanvragen die binnen één (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop van het apparaat worden ingediend. Reparatieverzoeken die later dan één (1) jaar na de datum van aankoop worden ingediend, worden niet gedekt door dit garantiebewijs. Reparatieverzoeken voor een gerepareerd of vervangen apparaat mogen niet later worden ingediend dan: (a) één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van het apparaat of (b) negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het gerepareerde of vervangen apparaat naar u werd geretourneerd, waarbij de meest recente datum maatgevend is. Indien er een sticker op uw apparaat is aangebracht met daarop een langere garantieperiode dan bovengenoemde, is de garantieperiode die op de sticker vermeld staat van toepassing en wordt het apparaat op grond van de garantie gerepareerd of vervangen totdat de genoemde periode afloopt.

Indien u het apparaat heeft aangeschaft in een EU-lidstaat, beschikt u over een extra jaar (ingevolge EU-Richtlijn 1999/44) om claims in te dienen vanwege gebreken of storingen aan uw apparaat die, naar het oordeel van Invention Works B.V. of de erkende dealer, reeds aanwezig waren op het moment van de aankoop, maar destijds

niet duidelijk naar voren kwamen. Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie dient u contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u het apparaat heeft aangeschaft of met het lokale servicecentrum, om hen onmiddellijk, en uiterlijk 60 dagen nadat de productiefout is ontdekt, in te lichten over deze fout.

Hoe kan ik gebruikmaken van de garantieservice? Voor verdere uitleg over het gebruikmaken van de garantieservice en voor contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicecentra, kunt u kijken op www.skinera.eu of e-mail info@skinera.eu.

NL

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten voor klanten, wordt u mogelijk verzocht een formulier in te vullen voor het retourneren van het product en dient u een referentienummer te ontvangen. Ingeval van een gebrek dat om welke reden dan ook niet gedekt wordt door de garantie, kan Invention Works B.V. de verzend- en reparatiekosten op u verhalen indien u ermee heeft ingestemd dat het apparaat op uw kosten gerepareerd zou worden.

Wat wordt niet gedekt door dit garantiebewijs? Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van een ongeval, verkeerd gebruik (waaronder het gebruiken van het apparaat op een andere manier dan beschreven staat in de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing), misbruik, onzorgvuldig onderhoud, oneigenlijk en onverstendig gebruik, waaronder, maar niet daartoe beperkt, commercieel of professioneel gebruik, het toevoegen van onderdelen die niet bij het product werden geleverd, het kwijtmaken van onderdelen, het gebruiken van niet-erkende reserveonderdelen of het blootstellen van het apparaat aan elektrische stroom anders dan de aangegeven stroom. De garantie komt te vervallen indien het apparaat bewerkt is door eenieder die niet erkend is door Invention Works B.V., en Invention Works B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van reparaties uitgevoerd door een

persoon die niet erkend is door Invention Works B.V. De garantie omvat geen vervanging van gebruikte niet-duurzame onderdelen.

AFWIJZING VAN GARANTIE DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE UITEENGEZET IN DIT DOCUMENT VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIG DEFECT AAN HET APPARAAT.

BEPERKINGEN IN GEEN GEVAL KAN INVENTION WORKS B.V., ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ERKENDE DEALERS AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER OF SMARTENGELD (WAARONDER, MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, SCHADE VANWEGE GEBRUIKSDERIVING OF KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR), ONGEACHT DE JURIDISCHE GRONDSLAG WAAROP DE CLAIM GEBASEERD IS, ZELFS NIET INDIEN ZIJ GEÏNFORMEERD ZOUDE ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE. INGEVAL WORDT GEOORDEELD DAT DE OPLOSSINGEN UITEENGEZET IN DEZE GARANTIE HUN ESSENTIËLE DOEL HEBBEN GEMIST OF INDIEN INVENTION WORKS B.V., ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ERKENDE DEALERS OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG DAN OOK GEHOUDEN ZIJN TOT HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INVENTION WORKS B.V., ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ERKENDE DEALERS IN GEEN GEVAL DE GROOTHANDELSPRIJS VAN ÉÉN ENKEL EXEMPLAAR VAN HET APPARAAT OVERSTIJGEN, WAARBIJ DE PRIJS OP DE DATUM WAAROP DE GROND VOOR DE VORDERING ONTSTAAT, MAATGEVEND IS. U AANVAARDT ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL AAN UZELF EN UW BEZITTINGEN, EN AAN ANDEREN EN HUN BEZITTINGEN, DIE RESULTEERT UIT HET GEBRUIK OF VERKEERDE GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, HET APPARAAT, BEHALVE VOOR ZOVER DIT EEN DIRECT GEVOLG IS VAN DE NALATIGHEID VAN INVENTION WORKS B.V. AAN DEZE GARANTIE KUNT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN ONTLENEN EN MOGELIJK KUNT U OOK AANSPRAAK MAKEN OP ANDERE RECHTEN DIE VARIËREN VAN LAND TOT LAND. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE, OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Verwijdering



Help het milieu te beschermen. Verwijder dit apparaat niet via het huishoudelijk afval en volg de wetten in uw land voor het afvoeren van elektrische producten.

Specificaties

| | |
|--|---|
| Modelnr. | IN4501 |
| Technologie | Tip op basis van luchtvacuüm |
| Ingangsvermogen | 12 V DC, 0,5 A |
| Gewicht | 110 g |
| Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden | Temperatuur: -40 °C tot +70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% tot 90% Atmosferische druk: 500 tot 1060 hPa |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Gebruiksomstandigheden | Temperatuur: 10 °C tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 75% Atmosferische druk: 700 tot 1060 hPa |
| Adaptermodellen en -classificatie | SAW12-050-2100XX XX verwijst naar het type stekker Ingangsspanning: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A Uitgangsspanning: 12 V - 0.5A |
| Verwachte levensduur van het apparaat | 3 jaar |
| Naleving | LVD: 2006/95/EG en 2014/35/EU EMC: 2004/108/EG en 2014/30/EU RICHTLIJN 2011/65/EG RoHS REACH-verordening (EG) 1907/2006 |

Tekens en symbolen



Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.



Klasse III. Het apparaat ontvangt voeding uit een bron met extra lage spanning.



Uitsluitend voor gebruik binnen.



Niet gebruiken in een natte omgeving.



Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval. Verwijderen volgens de regelgeving van uw land ter bescherming van het milieu. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn.